

Mantenimiento fácil

Cassette LM 810001

El instrumental de extracción se suministra con una cómoda cassette que protege tanto al instrumento como al profesional durante el ciclo de mantenimiento. La cassette impide que el instrumento perfora la bolsa de esterilización, por lo que resulta más sencillo garantizar la esterilización. Se pueda ajustar un código de color a la cassette con botones de silicona.

Piedra de afilar LM 818002

Las hojas acabadas a mano y fabricadas con acero superior LMDuraGradeMAX, se mantendrán afiladas y durarán más tiempo si se utilizan y se cuidan correctamente. Afile de vez en cuando el instrumental de extracción con esta piedra de afilar redonda; se trata de una forma rápida y sencilla de mantenerlo en buen estado y siempre listo para usar.

LMDental

LM-Instruments Oy
PL 88 (Norrbyn rantatie 8)
FI-21601 Parainen, Finland
Tel. +358 2 4546 400
Fax +358 2 4546 444
info@lm-dental.com
www.lm-dental.com

Póngase en contacto con
su distribuidor local



Elevadores para raíces

Root Tip Pick LM 769-771 ES/XSI

- para remover ápices radiculares
- excelente para tratamientos de las zonas de difícil acceso
- disponibles con mangos LM-ErgoSense (ES) y LM-ErgoMax (XSI)

LM-RootOut LM 812210

- diseñado para los tratamientos preparativos muy delicados de las raíces.
- no es apto para retirar las piezas de las ápices más sólidas
- similares a los instrumentos Heidbrink
- mango ergonómico para un agarre cómodo



Reservamos el derecho a realizar cualquier tipo de cambio.

0615

M1064ES

LM Extraction



Extracciones fiables

LM

feel the
difference

LMliftOut

Instrumental de luxación para realizar extracciones atraumáticas

El instrumental LM-LiftOut permite la extracción de piezas dentales de la forma menos traumática posible. Esto es muy importante para lograr una cicatrización rápida y la colocación del implante. La fina punta del instrumento se introduce en el espacio periodontal y avanza lentamente hacia el ápice de la raíz dental mientras se gira suavemente el instrumento hacia atrás y hacia delante. LM-LiftOut no es apto para usar comopalanca elevadora.



Ángulos y dimensiones

Modelo	Ángulo
Recto	
LM-LiftOut S2 LM 812220	2.5 mm
LM-LiftOut S3 LM 812230	3 mm
LM-LiftOut S4 LM 812240	4 mm
LM-LiftOut S5 LM 812250	5 mm
Curvado	
LM-LiftOut C3 LM 812430	3 mm
LM-LiftOut C4 LM 812440	4 mm
LM-LiftOut C5 LM 812450	5 mm

Extracciones fiables & para luxaciones atraumáticas

La ergonomía y la sensibilidad táctil propias de LM aplicadas al instrumental de extracción.

Características	Ventajas
Diseño ergonómico	- sujeción cómoda y rotación sencilla
Superficie segura LM-ErgoTouch	- ligera, antideslizante
Equilibrio óptimo	- agarre controlado
Ligereza	- más fácil de manejar
Codificación clara por colores	- identificación sencilla
Acero superior LM-DuraGradeMAX	- puntas más fuertes y afiladas
Junta estrecha sólida	- mayor higiene



Instrumentos de extracción LM clasificados como mejor producto 2014.




Escanee el código QR!

LM SlimLift

Instrumentos de luxación diseñados para las áreas especialmente estrechas

Los instrumentos LM-SlimLift son particularmente destinados a acceder las áreas difíciles de alcanzar que no son accesibles por los instrumentos de luxación tradicionales. Permiten las extracciones de piezas dentales de la forma menos traumática posible. Esto es muy importante para una cicatrización rápida. La punta ultra fina del instrumento se introduce en el espacio periodontal y avanza lentamente hacia el ápice mientras se gira suavemente el instrumento hacia atrás y hacia delante. LM-SlimLift no es apto para usar como palanca elevadora.

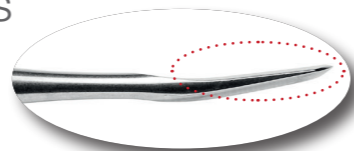

El diseño extremadamente fino de la hoja permite las extracciones más atraumáticas posibles.

Los instrumentos finos LM-SlimLift: son una solución mucho más atraumática

Doctor en Medicina (MD), Doctor en Cirugía Dental (DDS), Doctor en Ciencias Médicas, Cirujano dentista Peter Jungell



"Actualmente utilizo los instrumentos LM-SlimLift para casi todas las extracciones. También utilizo mis instrumentos de luxación anteriores preferidos, mientras que el uso del instrumental tradicional se ha vuelto menos frecuente.

El instrumental de luxación fino de LM puede introducirse en espacios periodontales particularmente estrechos. Cuando se emplean instrumentos anchos, la fuerza de luxación se disemina sobre una zona más amplia hacia los laterales y más profunda hacia el ápice de la raíz, de modo que el riesgo de fractura, sobre todo de las raíces frágiles, se limita considerablemente. La mayoría de las extracciones pueden realizarse con instrumentos de luxación sin necesidad de aplicar ninguna otra medida operativa.

El diseño y el material del instrumento LM-SlimLift garantizan un agarre excelente en el instrumento. En un primer momento, los mangos pueden resultar demasiado

grandes, pero en las tareas clínicas se adaptan a la mano perfectamente. El instrumento puede sujetarse en la palma de la mano o solo con los dedos. Resulta fácil elegir un instrumento apto para cualquier tarea clínica entre la amplia selección de tamaños. Las hojas anchas son idóneas para la extracción de los molares inferiores, mientras que las puntas finas son perfectas, por ejemplo, para la extracción de las raíces estrechas de los dientes superiores.

Puedo recomendar los instrumentos LM-SlimLift a todos los dentistas: es sensato prescindir por completo de los instrumentos antiguos e ineficientes. Con frecuencia se escuchan casos en los que el tratamiento de la raíz ha durado cerca de dos horas."

Ángulos y dimensiones

Recto

LM-SlimLift S3
LM 812630



LM-SlimLift S4
LM 812640



LM-SlimLift S5
LM 812650



Curvado

LM-SlimLift C3
LM 812830



LM-SlimLift C4
LM 812840



LM-SlimLift C5
LM 812850



LM TwistOut

Palancas elevadoras para extracciones que requieren fuerza

El instrumental LM-TwistOut es apto para extracciones dentales en situaciones que requieren la aplicación de gran fuerza o torsión.



“Este elevador de LM-Instruments está expresamente diseñado para aplicaciones de torsión”

Bite Magazine, agosto de 2014,
Dr. Davis Lakatos,
Odontología general, Kilcoy, QLD, Australia

“Conocí este elevador en el Congreso Australiano de Odontología, celebrado en Melbourne el año pasado. Como trabajamos en el ámbito rural y, probablemente practicamos más extracciones que en las zonas urbanas, es una herramienta muy útil.

Considero que los luxadores suelen ser bastante finos y propensos a doblarse o romperse si se ejerce demasiada presión. Este elevador de LM Instruments está expresamente diseñado para aplicaciones de torsión.

Lo utilizo en todas las extracciones porque existe una gama completa de modelos curvos y rectos en todos los tamaños. Es un instrumento muy resistente y sencillo que facilita mucho las extracciones.

A menudo me he preguntado por qué no existía un luxador más resistente en el mercado, pero resulta que este elevador es precisamente lo que estaba buscando.”

Ángulos y dimensiones

Recto

LM-TwistOut S3
LM 814230



3 mm

LM-TwistOut S4
LM 814240



4 mm

LM-TwistOut S5
LM 814250



5 mm

Curvado

LM-TwistOut C3
LM 814430



3 mm

LM-TwistOut C4
LM 814440



4 mm

LM-TwistOut C5
LM 814450



5 mm