

Styleitaliano

fundado por el Dr. Walter Devoto y el Prof. Angelo Putignano

Style Italiano es un grupo de apasionados clínicos e investigadores, que están constantemente desarrollando materiales y técnicas para odontología estética y conservadora. Su filosofía se basa en desarrollar soluciones para que la excelencia en los resultados estéticos y funcionales de la odontología sean obtenibles por todos los profesionales.

Para Polydentia, la colaboración con Style Italiano es más que una fuente de inspiración. Es una oportunidad para renovar constantemente su compromiso de llevar la excelencia de la manufactura Suiza al servicio de la odontología en todo el mundo.



Visita "Unica Community" para compartir casos clínicos de *Unica anterior*

Síguenos **#thinkunica**



Polydentia SA
via Cantonale 47
6805 Mezzovico-Vira
Switzerland

phone: +41 91 946 29 48
fax: +41 91 946 32 03
info@polydentia.ch
www.polydentia.ch



Especialidades Dentales Kalma S.A.
Camino de las Hormigueras, 118
28031 Madrid, España

Tel. +34 91 380 23 83
kalma@kalma.es
www.kalma.es

única anterior



Cover photo by Dr. Dan Lazar

REV 02.10.2018

la solución definitiva para restauraciones anteriores

matrix systems





1 Restauración de ambos márgenes, interproximal y cervical, al mismo tiempo

2 Perfil contorneado para una restauración anatómica de los márgenes interproximales

3 Aletas de colocación para un fácil posicionamiento y adaptación de la matriz

4 Fácil manejo del área cervical: restauraciones predecibles y/o retracción gingival

unica anterior

powered by: **STYLE ITALIANO**



"En el presente de la odontología conservadora, la elección de productos y técnicas que aplicamos cada día debe ser predecible y económica, incorporando avances sencillos y claros para nuestros procedimientos rutinarios. Unica es la solución para las restauraciones anteriores habituales, bien sean clases III, IV, V, modificaciones de forma y/o carillas de composite directas con técnica estratificada. Una matriz efectiva para restauraciones del día a día con resultados estéticos y funcionales."

Dr. Jordi Manauta, DDS
Head of StyleItaliano Idea Factory
Sestri Levante, Italia

Carillas de composite

para más información



Unica es la matriz simple e ideal para restauraciones anteriores como clases III, IV y V, carillas de composite con técnica estratificada directa y modificaciones de forma.

Gracias a su forma contorneada, Unica se adapta a las diversas morfologías de los dientes anteriores y hace posible restaurar los márgenes proximales y cervicales al mismo tiempo, aún en presencia de aislamiento con diques de goma o hilos retractores. Las aletas de colocación permiten un posicionamiento rápido y eficaz de la matriz.

En adición, las matrices Unica anterior permiten visualizar la forma final de la restauración una vez colocadas, incluso antes de comenzar el procedimiento.

kit



Unica Introkit anterior - REF 6900

- 35 uds. Unica anterior matrices
- 40 uds. myWedge XS
- 40 uds. myWedge S
- 40 uds. myWedge M
- 1 ud. myCustom Resin, Jeringa de 3 ml
- 7 uds. puntas de jeringa de calibre 18
- 1 ud. myQuickmatrix Forceps

reposición



Unica anterior matrices
REF 6912 12 uds
REF 6950 50 uds



REF 5703
myQuickmatrix Forceps



REF 7101
myWedge
Extrasmall (XS) 100 uds



REF 7102
myWedge
Small (S) 100 uds



REF 7103
myWedge
Medium (M) 100 uds



REF 6811
myCustom Resin, jeringa de 3 ml y 10 uds.
puntas de jeringa de calibre 18

Restauración de clase III

En casos de caries de clase III, donde el margen proximal está ausente, Unica es realmente útil al permitir al clínico ver la forma final incluso antes de comenzar a restaurar.

Dr. Giuseppe Chiodera
Brescia, Italia



para más información



Restauración de clase IV

Para esta restauración de clase IV, Unica ayuda a restaurar los contornos cervicales y proximales anatómicamente de manera muy rápida.

Dr. Dan Lazar
Oradea, Rumania



para más información



Unica anterior matrices



myQuickmatrix Forceps



myCustom resin



myWedge



Fijar Unica anterior con myCustom Resin cuando la cuña interdental podría deformar y/o mover la matriz.


Restauración de clase V

En los casos de restauraciones de clase V, la forma contorneada de la matriz ayuda al clínico a identificar y visualizar el contorno cervical antes de proceder con el tratamiento. El contorno anatómico del cuello cervical permite además un acceso cómodo al campo operatorio.

Dr. Giuseppe Chiodera
Brescia, Italia



para más información

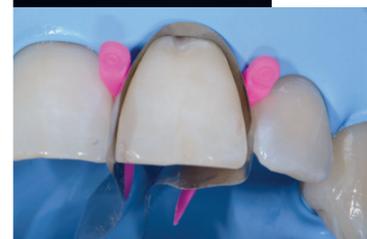

Modificación de forma

El diseño único de Unica hace de esta matriz una herramienta esencial y muy eficiente, ya que nos permite trabajar las áreas interproximales y cervicales al mismo tiempo.

Dr. Carlos Fernández Villares
Madrid, España



para más información



polydentia
swiss manufacture